

PHILIPS

IPL – Szórtelenítő készülék

Lumea Prestige

4 intelligens tartozék

Hónalj, bikinivonal, test, arc

SmartSkin érzékelővel

Vezetékes és vezeték nélküli használat



BRI956/00



Élvezze a 6 hónapon* át tartó szórtelen simaságot

Az intelligens tartozékok a kialakításuk révén a legjobb eredményt biztosítják

A készülék az optimális eredmény elérése céljából tervezett, speciálisan ívelt tartozékokkal rendelkezik. A Philips Lumea Prestige vezetékes és vezeték nélküli használatot, valamint egy SmartSkin érzékelőt is biztosít.

Hosszan tartó sima bőr, a Lumea IPL technológiának köszönhetően

- Bőrgyógyászok segítségével otthoni használatra kifejlesztett IPL villanófényes szórtelenítő
- Bizonyítottan biztonságos és hatásos kezelés
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt
- Vezeték nélküli vagy vezetékes használat

Különböző kezelések a különböző testrészekhez

- Az intelligens tartozékok az adott testrészhez igazítják a kezelést
- Közepes méretű hónalj-szórtelenítő tartozék kifelé ívelt kialakítással
- Ívelt tartozék extra szűrővel a bikiniterülethez
- Nagy testszórtelenítő tartozék befelé ívelt kialakítással
- Precíz arcszórtelenítő tartozék plusz szűrővel

Maximális szabadság, problémák nélkül


- SmartSkin érzékelővel
- INGYENES Lumea alkalmazás, hogy legyen egy mindig elérhető személyes tanácsadója
- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek



asimpleswitch.com

Fénypontok

A Lumea segít megakadályozni a szőrszálak újranövekedését*

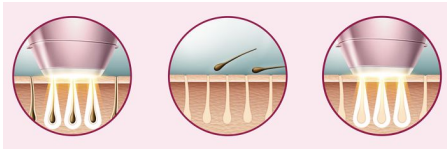

Az IPL jelentése „intenzíven pulzáló fény”. A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőbe, így a tüszők nyugalmi állapotba lépnek. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz. A szőrszálak visszánövését megakadályozó kezelés még az érzékeny területeken is biztonságos és gyengéd. A klinikailag igazolt, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztett Philips Lumea otthona kényelmében teszi lehetővé az egyszerű és hatékony kezelést.

Igazolt hatékonyságú



Objektív tanulmányok alapján a visszánövő szőr mennyiségében alig 3 kezelést követően akár 92%-os csökkenés mutatható ki.** Az első 4 kezelést kéthetente kell elvégezni, amely után már láthatja a kívánt eredményt. A tartós eredmény érdekében csak végezzen el egy utókezelést négyhetente. Mindössze 8 utókezelés után bőre 6 hónapig szőrmentes marad.* A kép nagyításához kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában.

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok



A Philips Lumea Prestige hatékonyan, egyszerűen és biztonságosan működik többféle szőr- és bőrtípus esetén. A

természetes sötétszőke, barna és fekete szőrszálakon és a nagyon fehértől a sötét barnáig terjedő bőrszín esetében működik. Ahogy más IPL-alapú kezeléseket is, a Philips Lumea nem használható fehér / ősz, világos szőke és vörös szőrzet kezelésére, és nem alkalmazható nagyon sötét bőrszín esetén. Ennek az az oka, hogy nagy kontrasztnak kell lennie a haj és a bőr színpigmentje között.

Testrészek kezelése



A szőr mennyisége és minősége, valamint testének vonalai nem mindenhol ugyanolyanok, így a legjobb eredmény érdekében minden testrész eltérő kezelést igényel. A Philips Lumea Prestige egyedi ívelt és intelligens tartozékokkal rendelkezik a test (láb, kar, has) és az arc (felső ajkak, áll) területeire. Az intelligens tartozékok alak, ablakméret és szűrő kombinációi eltérőek. Mikor egy tartozékot felhelyez a készülékre, az adott testrészre szabott kezelési programot állít be. Az átgondolt formatervezés és az egyedi kezeléseket ötvöztetése így hatékony és biztonságos kezelést tesz lehetővé még a finom vagy érzékeny területeken is.

Hónalj-szőrtelenítő tartozék



A speciálisan ívelt tartozékot a nehezen elérhető hónaljszőrzet kezeléséhez tervezték 3 cm²-es ablakmérettel. Mikor az intelligens tartozékot felhelyezik a készülékre, a hónaljra szabott kezelés kerül kiválasztásra. A nők 86%-a elégedett a hónalj szőrzetének csökkenésével.***

Tartozék bikinivonal kezelésére



Ehhez az ívelt, 3 cm²-es ablakméretű tartozékhoz egy plusz átlátszó szűrő is tartozik. A bikiniterület számára megfelelő fénykezelés az intelligens tartozék készülékre való felhelyezésekor automatikusan beállítódik. A nők 78%-a elégedett a bikiniterület szőrzetének csökkenésével.***



asimpleswitch.com

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips Green fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

Műszaki adatok

Alkalmazási területek

Testterületek: Kar, Láb, Has

Arc: Áll, Felső ajak, Állkapocsvonal

Érzékeny területek: Hónalj, Bikinivonal

Műszaki adatok – tartozékok

Tartozék a test kezeléséhez: Forma:

domborúan ívelt, Ablakméret: 4,1 cm², Testhez szabott kezelés

Tartozék az arc kezeléséhez: Forma: lapos, Ablakméret: 2 cm²-es, extra szűrő, Archoz szabott kezelés

Tartozék a hónalj kezeléséhez: Forma: homorúan ívelt, Ablakméret: 3 cm², Hónaljhoz szabott kezelés

Tartozék a bikinivonal kezeléséhez: Forma: homorúan ívelt, Ablakméret: 3 cm²-es, extra szűrő, Bikinivonalhoz szabott kezelés

Alkalmazás módja

Slide and flash: Gyors alkalmazás

Stamp and flash: Kisebb területek kezeléséhez

Vezetékes/vezeték nélküli használat:

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása

Bőrtónus-érzékelő: Érzékeli a bőrtónusát

SmartSkin érzékelő: A megfelelő beállítás igény szerint

Alkalmazási idő

Lábszárak: 8,5 perc

Hónalj: 2,5 min

Bikinivonal: 2 perc

Arc: 1,5 min

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: > 250 000 villanást biztosít

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Tartozékok

Használati útmutató: Felhasználói kézikönyv

Tárolás: Luxus védőtok

adapter: 19,5 V / 4000 mA

Szerviz

Jótállás: Kétéves globális garancia



* Átlageredmény a lábakon: 78%, 12 kezelés után, 48 nő részvételével Hollandiában és Ausztriában végzett objektív tanulmány alapján

** Akár 92%-os szőrzetszökkenés 3 kezelés után a kezelési előírások követése esetén, lábon felmérve, az egyedi eredmények eltérőek lehetnek

*** Hollandiában és Ausztriában 46 nő részvételével hónalj, bikinivonalon, lábakon 3 kezelés után, illetve arcon 2 kezelés után végzett felmérés