




**HealthyWhite**  
Rechargeable  
sonic toothbrush

**PHILIPS**  
sonicare

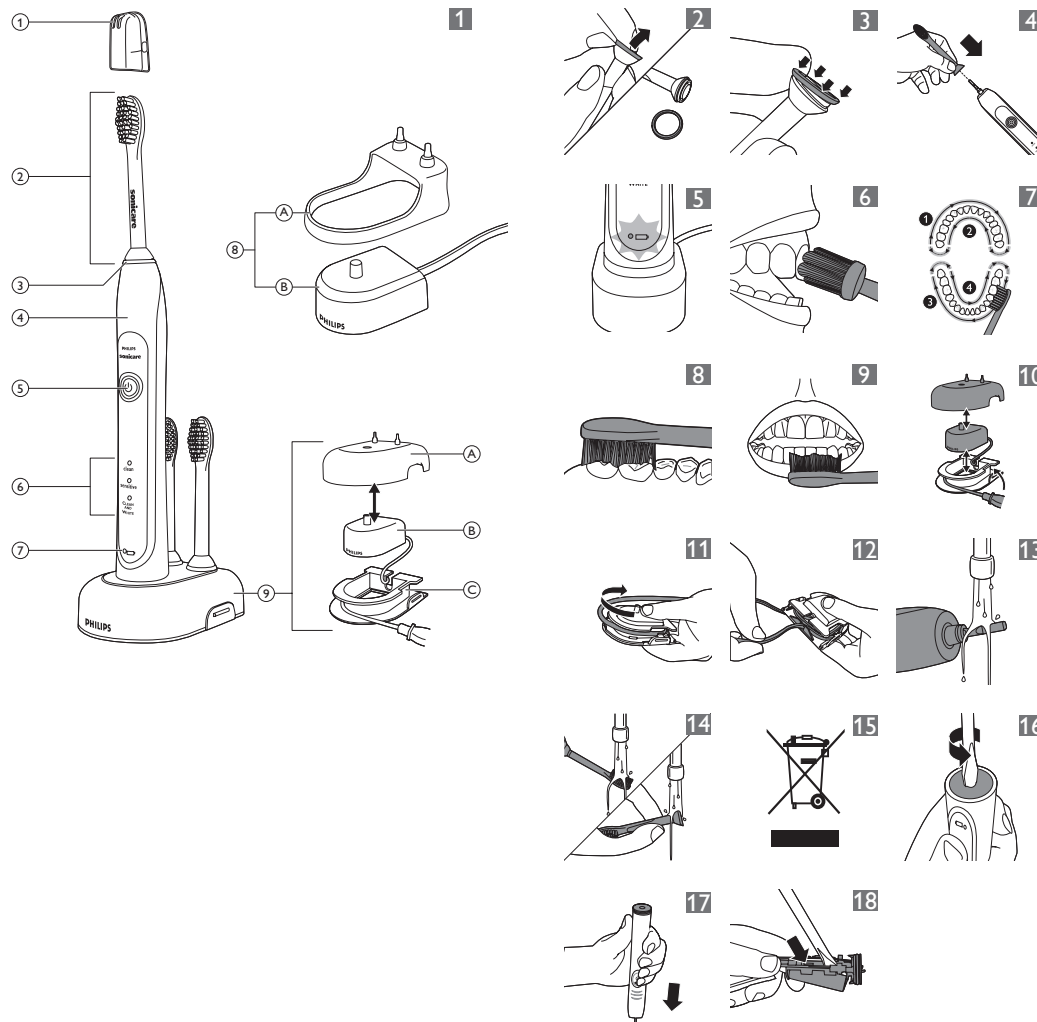

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Σημαντικό

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

### Κίνδυνος

- Διατηρείτε τη βάση φόρτισης μακριά από νερό. Μην την τοποθετείτε ή αποθηκεύετε πάνω από ή κοντά σε νερό που περιέχεται σε μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, κλπ. Μην βυθίζετε τη βάση φόρτισης σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης είναι εντελώς στεγνή πριν την συνδέσετε στην πρίζα.

### Προειδοποίηση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Το καλώδιο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο φθαρεί, απορρίψτε τη βάση φόρτισης. Αντικαθιστάτε πάντα τη βάση φόρτισης με γνήσια προς αποφυγή κινδύνων.
- Εάν η συσκευή υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (κεφαλή βουρτσίσματος, λαβή οδοντόβουρτσας ή/και βάση φόρτισης), σταματήστε να την χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν μπορούν να επισκευαστούν. Εάν η συσκευή υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας (δείτε το κεφάλαιο 'Εγγύηση και σέρβις').
- Μην χρησιμοποιείτε τη βάση φόρτισης σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά

δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν διεργασίες συντήρησης, εκτός κι αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή

### Προσοχή

- Εάν έχετε χειρουργηθεί στο στόμα ή τα ούλα κατά τους 2 προηγούμενους μήνες, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε την οδοντόβουρτσα.
- Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας εάν παρουσιαστεί υπερβολική αιμορραγία μετά τη χρήση αυτής της οδοντόβουρτσας ή εάν η αιμορραγία εξακολουθήσει να παρουσιάζεται μετά από 1 εβδομάδα χρήσης.
- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη Sonicare.
- Η οδοντόβουρτσα Sonicare συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας για τις ηλεκτρομαγνητικές συσκευές. Εάν έχετε βηματοδότη ή οποιαδήποτε άλλη εμφυτευμένη συσκευή, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της εμφυτευμένης συσκευής πριν τη χρήση.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον καθαρισμό δοντιών, ούλων και γλώσσας. Μην την χρησιμοποιήσετε για κανένα άλλο σκοπό. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το γιατρό σας σε περίπτωση που νιώσετε δυσφορία ή πόνο.
- Η οδοντόβουρτσα Sonicare είναι συσκευή προσωπικής φροντίδας και δεν προορίζεται για χρήση σε πολλαπλούς ασθενείς σε οδοντιατρεία ή ιατρικά κέντρα.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη κεφαλή βουρτσίσματος εάν οι τρίχες της καταστραφούν ή λυγίσουν. Αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα εάν εμφανιστούν σημάδια φθοράς.
- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικές κεφαλές βουρτσίσματος από αυτές που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Εάν η οδοντόκρεμά σας περιέχει υπεροξειδίου του υδρογόνου, baking soda ή άλλα διττανθρακικά συστατικά (συνήθη σε λευκαντικές οδοντόκρεμες), καθαρίζετε πολύ καλά την κεφαλή βουρτσίσματος και τη λαβή με νερό και σαπουνί μετά από κάθε χρήση. Διαφορετικά το πλαστικό ενδέχεται να σπάσει.

- Μην καθαρίζετε τις κεφαλές βουρτσίσματος, τη λαβή, τη βάση φόρτισης και το κάλυμμα της βάσης φόρτισης στο πλυντήριο πιάτων.

### Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

### Η οδοντόβουρτσα Sonicare (Εικ. 1)

- 1 Κάλυμμα ταξιδιού για υγιεινή
- 2 Κεφαλή βουρτσίσματος
- 3 Εναλλάξιμος δακτύλιος με χρωματική κωδικοποίηση
- 4 Αντιολισθητική λαβή
- 5 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 6 Λειτουργίες βουρτσίσματος
- 7 Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
  - Ένδειξη πολυτελούς βάσης φόρτισης (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)
  - Ένδειξη τυπικής βάσης φόρτισης (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)
- 8 Τυπική βάση φόρτισης (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)
  - 8A Κάλυμμα βάσης φόρτισης με στήριγμα κεφαλής βουρτσίσματος
  - 8B Βάση φόρτισης ταξιδιού
- 9 Πολυτελής βάση φόρτισης (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)
  - 9A Κάλυμμα βάσης φόρτισης με στήριγμα κεφαλής βουρτσίσματος
  - 9B Βάση φόρτισης ταξιδιού
  - 9C Βάση φόρτισης με χώρο περιτύλιξης καλωδίου

### Έναρξη

#### Αλλαγή δακτυλίου με χρωματική κωδικοποίηση

Οι κεφαλές βουρτσίσματος Sonicare διαθέτουν εναλλάξιμους δακτύλιους με χρωματική κωδικοποίηση, για να αναγνωρίζετε την κεφαλή σας.

Για να αλλάξετε το δακτύλιο με χρωματική κωδικοποίηση:

- 1 Τραβήξτε το δακτύλιο με χρωματική κωδικοποίηση από το κάτω μέρος της κεφαλής βουρτσίσματος (Εικ. 2).

- 2 Για να προσαρτήσετε ένα νέο δακτύλιο, περάστε το ένα άκρο του καινούργιου δακτυλίου στο κάτω μέρος της κεφαλής βουρτσίσματος. Στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω το άλλο άκρο, ώστε να ασφαλίσει ο δακτύλιος στη θέση του (Εικ. 3).

#### Προσάρτηση της κεφαλής βουρτσίσματος

- 1 Ευθυγραμμίστε την κεφαλή βουρτσίσματος, έτσι ώστε οι τρίχες να είναι στραμμένες προς την πρόσοψη της λαβής. (Εικ. 4)
- 2 Πιέστε σταθερά την κεφαλή βουρτσίσματος πάνω στον μεταλλικό άξονα μέχρι να σταματήσει.

Σημείωση: Υπάρχει ένα μικρό κενό ανάμεσα στο δακτύλιο με χρωματική κωδικοποίηση και τη λαβή.

#### Φόρτιση της Sonicare

- 1 Συνδέστε το φισ της βάσης φόρτισης στην πρίζα.
  - 2 Τοποθετήστε τη λαβή στη βάση φόρτισης (Εικ. 5).
    - ▶ Η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας δίπλα από το σύμβολο μπαταρίας αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η οδοντόβουρτσα φορτίζεται.
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας**
- Η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας υποδεικνύει την κατά προσέγγιση υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας.
- Ένδειξη πολυτελούς βάσης φόρτισης (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους):
- Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: 50-100%
  - Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα: 10-49%
  - Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα: λιγότερο από 10%
- Ένδειξη τυπικής βάσης φόρτισης (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους):
- Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: 50-100%
  - Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα: λιγότερο από 50%

Σημείωση: Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, ακούγονται 3 ηχητικά σήματα μετά την ολοκλήρωση του κύκλου βουρτσίσματος και η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Για να διατηρείτε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη, μπορείτε να αφήνετε τη Sonicare πάνω στη βάση φόρτισης όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Χρειάζονται 24 ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

### Χρήση της οδοντόβουρτσας Sonicare

#### Οδηγίες βουρτσίσματος

- 1 Βρέξτε τις τρίχες της βούρτσας και απλώστε μια μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας.
- 2 Τοποθετήστε τις τρίχες της οδοντόβουρτσας στα δόντια και με μικρή γωνία προς τη γραμμή των ούλων (Εικ. 6).
- 3 Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη Sonicare.
- 4 Εφαρμόστε ελαφριά πίεση για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της Sonicare και αφήστε την οδοντόβουρτσα Sonicare να κάνει όλη τη δουλειά για εσάς.
- 5 Μετακινήστε απαλά και αργά την κεφαλή βουρτσίσματος κατά μήκος των δοντιών με μικρές κινήσεις εμπρός-πίσω, έτσι ώστε οι μακρύτερες τρίχες να φτάνουν ανάμεσα στα δόντια. Συνεχίστε αυτή την κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια του βουρτσίσματος.

Σημείωση: Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο βούρτσισμα, χωρίστε το στόμα σε 4 τμήματα χρησιμοποιώντας το Quadrascer (δείτε το κεφάλαιο 'Χαρακτηριστικά').

- 6 Ξεκινήστε το βούρτσισμα στο τμήμα 1 (εξωτερική πλευρά επάνω δοντιών) και βουρτσίστε για 30 δευτερόλεπτα προτού προχωρήσετε στο τμήμα 2 (εσωτερική πλευρά επάνω δοντιών). Συνεχίστε το βούρτσισμα στο τμήμα 3 (εξωτερική πλευρά κάτω δοντιών) και βουρτσίστε για 30 δευτερόλεπτα προτού προχωρήσετε στο τμήμα 4 (εσωτερική πλευρά κάτω δοντιών) (Εικ. 7).
- 7 Αφού ολοκληρώσετε τον κύκλο βουρτσίσματος, μπορείτε να προχωρήσετε στο βούρτσισμα των σημείων μάσησης των δοντιών σας και των σημείων με λεκέδες. Μπορείτε επίσης να βουρτσίσετε τη γλώσσα σας, με την οδοντόβουρτσα ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη, ανάλογα με το τι προτιμάτε (Εικ. 8).

Η Sonicare μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε:

- Σιδεράκια (οι κεφαλές βουρτσίσματος φθείρονται πιο γρήγορα όταν χρησιμοποιούνται σε σιδεράκια)
- Οδοντιατρικές αποκαταστάσεις (σφραγίσματα, γέφυρες, επικαλύψεις)

**Σημείωση:** Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα.

### Οδηγίες βουρτσίσματος στη λειτουργία Clean and White

Η λειτουργία Clean and White αποτελείται από 2 λεπτά στη λειτουργία Clean για καθαρισμό όλου του στόματος και 30 δευτερόλεπτα στη λειτουργία White για εστίαση στα μπροστινά δόντια που φαίνονται.

**1** Βουρτσίστε τα πρώτα 2 λεπτά όπως περιγράφεται στα βήματα 1-6 παραπάνω.

**2** Μετά από 2 λεπτά στη λειτουργία Clean, αρχίζει η λειτουργία White και αλλάζει ο ήχος και η κίνηση του βουρτσίσματος. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι πρέπει να αρχίσετε να βουρτσίσετε τα επάνω μπροστινά δόντια για 15 δευτερόλεπτα

**3** Την επόμενη φορά που θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και θα σταματήσει προσωρινά η οδοντόβουρτσα, προχωρήστε στο βούρτσισμα των κάτω μπροστινών δοντιών για ακόμα 15 δευτερόλεπτα (Εικ. 9).

### Λειτουργίες βουρτσίσματος

Η Sonicare ξεκινά αυτόματα στην προεπιλεγμένη λειτουργία Clean. Για να επιλέξετε μια διαφορετική λειτουργία βουρτσίσματος:

- 1** Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών.
- 2** Η πράσινη λυχνία LED υποδεικνύει την επιλεγμένη λειτουργία.

**Σημείωση:** Μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία μόνο όταν η οδοντόβουρτσα είναι ενεργοποιημένη.

### Λειτουργία Clean

Τυπική λειτουργία για τέλειο καθαρισμό των δοντιών.

### Λειτουργία Sensitive (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)

Απαλός και συγχρόνως σχολαστικός καθαρισμός για ευαίσθητα ούλα και δόντια.

### Λειτουργία Clean and White

2 λεπτά στη λειτουργία Clean και επιπλέον 30 δευτερόλεπτα στη λειτουργία White, για εστίαση στα μπροστινά δόντια που φαίνονται.

**Σημείωση:** Όταν η Sonicare χρησιμοποιείται σε κλινικές μελέτες, πρέπει να επιλέγεται η προεπιλεγμένη λειτουργία Clean 2 λεπτών. Ωστόσο, σε μελέτες λεύκανσης/μείωσης των κηλίδων, πρέπει να επιλέγεται η λειτουργία Clean and White. Η λαβή πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη και η λειτουργία Easy-start απενεργοποιημένη.

### Χαρακτηριστικά

#### Easy-start

- Αυτή η οδοντόβουρτσα Sonicare διατίθεται με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Easy-start.
- Η λειτουργία Easy-start αυξάνει σταδιακά την ισχύ στα πρώτα 14 βουρτσίσματα, ώστε να εξοικειωθείτε στο βούρτσισμα με τη Sonicare.

**Σημείωση:** Κάθε ένα από τα πρώτα 14 βουρτσίσματα θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 1 λεπτό, για ομαλή μετάβαση στον κύκλο κλιμάκωσης Easy-start.

**Σημείωση:** Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία Clean and White, η λειτουργία Easy-start είναι ανενεργή.

### Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού Easy-start

- 1** Προσαρτήστε την κεφαλή βουρτσίσματος στη λαβή.
- 2** Τοποθετήστε τη λαβή στη συνδεδεμένη στην πρίζα βάση φόρτισης.

- Για να απενεργοποιήσετε το Easy-start: Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε 1 ηχητικό σήμα το οποίο υποδηλώνει ότι η λειτουργία Easy-start απενεργοποιήθηκε.

- Για να ενεργοποιήσετε το Easy-start: Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε 2 ηχητικά σήματα τα οποία υποδηλώνουν ότι η λειτουργία Easy-start ενεργοποιήθηκε.

**Σημείωση:** Η χρήση της λειτουργίας Easy-start πέραν της αρχικής περιόδου κλιμάκωσης δεν συνιστάται και μειώνει την αποτελεσματικότητα της οδοντόβουρτσας Sonicare ως προς την αφαίρεση της πλάκας.

### Smartimer

Το Smartimer υποδεικνύει ότι ο κύκλος βουρτσίσματος έχει ολοκληρωθεί, απενεργοποιώντας αυτόματα την οδοντόβουρτσα στο τέλος του κύκλου βουρτσίσματος.

Οι οδοντίατροι συνιστούν να βουρτσίσετε τα δόντια σας δύο φορές την ημέρα για τουλάχιστον 2 λεπτά.

Εάν θέλετε να διακόψετε προσωρινά ή οριστικά το βούρτσισμα κατά τη διάρκεια του 2λεπτου κύκλου, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα. Πιέστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και το Smartimer θα συνεχίσει από όπου είχατε σταματήσει.

Το Smartimer επανέρχεται αυτόματα στην αρχή ενός 2λεπτου κύκλου εάν:

- διακόψετε το βούρτσισμα για 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
- τοποθετήστε τη λαβή στη βάση φόρτισης.

### Quadpacer (επιλεγμένα μοντέλα)

- Το Quadpacer είναι ένα ενδιάμεσο χρονόμετρο, το οποίο παράγει ένα σύντομο ηχητικό σήμα και διακόπτει προσωρινά το βούρτσισμα, για να σας υπενθυμίζει να βουρτσίσετε τα 4 τμήματα του στόματος ομοιόμορφα και αποτελεσματικά (Εικ. 7).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Clean ή Sensitive δύο λεπτών, θα ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα και το βούρτσισμα θα διακοπεί προσωρινά στα 30, 60 και 90 δευτερόλεπτα.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Clean and White, θα ακούσετε και θα αισθανθείτε μια αλλαγή στον ήχο και στην κίνηση της κεφαλής βουρτσίσματος μετά από 2 λεπτά στη λειτουργία Clean. Θα πρέπει να μετακινήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος στα επάνω μπροστινά δόντια και να βουρτσίσετε για 15 δευτερόλεπτα. Στο τελευταίο ηχητικό σήμα και τη διακοπή, προχωρήστε στα κάτω μπροστινά δόντια και βουρτσίστε για 15 δευτερόλεπτα (Εικ. 9).

### Χώρος περιτύλιξης καλωδίου (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)

Εάν ο τύπος Sonicare που διαθέτετε περιλαμβάνει την πολυτελή βάση φόρτισης και το κάλυμμα, η βάση φόρτισης ταξιδιού είναι προ-εγκατεστημένη στο εσωτερικό του καλύμματος. Εάν θέλετε να κοντύνετε το καλώδιο ρεύματος, μπορείτε να αποθηκεύσετε το καλώδιο που περισσεύει στο χώρο αποθήκευσης καλωδίου στη βάση φόρτισης.

**1** Για να διαχωρίσετε το κάλυμμα της βάσης φόρτισης από τη βάση φόρτισης, πιέστε τις δύο γκρι μπάρες συγκράτησης στη βάση φόρτισης και τραβήξτε το λευκό κάλυμμα της βάσης φόρτισης προς τα επάνω. (Εικ. 10)

**2** Τυλίξτε το καλώδιο που περισσεύει γύρω από γκρι βάση φόρτισης όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει το καλώδιο στο εσωτερικό των δύο μοχλών συγκράτησης. (Εικ. 11)

**3** Αφού αποθηκεύσετε το καλώδιο που περισσεύει, περάστε το καλώδιο από τη μικρή εγκοπή στο πίσω μέρος της γκρι βάσης φόρτισης. (Εικ. 12)

**4** Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα της βάσης φόρτισης, πιέστε το προς τα κάτω στη βάση φόρτισης μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.

**Συμβουλή:** Για μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, μπορείτε να αφαιρέσετε τη βάση φόρτισης ταξιδιού και να τη χρησιμοποιήσετε χωρίς το κάλυμμα και τη βάση φόρτισης.

### Καθάρισμα

Μην καθαρίζετε τις κεφαλές βουρτσίσματος, τη λαβή, τη βάση φόρτισης ή τα καλύμματα της βάσης φόρτισης στο πλυντήριο πιάτων.

### Λαβή οδοντόβουρτσας

**1** Αφαιρέστε την κεφαλή βουρτσίσματος και ξεπλύνετε την περιοχή του μεταλλικού άξονα με ζεστό νερό (Εικ. 13).

Μην πιέζετε το κάλυμμα από καουτσούκ πάνω στο μεταλλικό άξονα με αιχμηρά αντικείμενα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

**2** Καθαρίστε ολόκληρη την επιφάνεια της λαβής με ένα υγρό πανί.

## Κεφαλή βουρτσίσματος

- 1 Ξεπλένετε την κεφαλή βουρτσίσματος και τις τρίχες μετά από κάθε χρήση (Εικ. 14).
- 2 Αφαιρείτε την κεφαλή βουρτσίσματος από τη λαβή και ξεπλένετε τη σύνδεση της κεφαλής βουρτσίσματος τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με ζεστό νερό.

## Βάση φόρτισης

- 1 Αποσυνδέετε τη βάση φόρτισης από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- 2 Καθαρίστε την επιφάνεια της βάσης φόρτισης με ένα υγρό πανί.

## Συστήματα αποθήκευσης

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα, καθαρίστε την και αποθηκεύστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χώρο περιτύλιξης καλωδίου (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) για να αποθηκεύσετε το καλώδιο ρεύματος με οργανωμένο τρόπο.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις κεφαλές βουρτσίσματος στα στηρίγματα στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης.

## Αντικατάσταση

### Κεφαλή βουρτσίσματος

- Αντικαθιστάτε τις κεφαλές βουρτσίσματος της Sonicare κάθε 3 μήνες για βέλτιστα αποτελέσματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικές κεφαλές βουρτσίσματος ProResults Sonicare.

## Απόρριψη

- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 15).
- Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Να αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν απορρίψετε τη συσκευή και την παραδώσετε σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Να απορρίπτετε την μπαταρία σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Εάν αντιμετωπίσετε

δυσκολίες στην αφαίρεση της μπαταρίας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν την μπαταρία για εσάς και θα την απορρίψουν με τρόπο ασφαλής για το περιβάλλον.

## Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η διαδικασία αυτή δεν αναιρείται.

- 1 Για να αδειάσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από οποιαδήποτε υπολειπόμενη ισχύ, αφαιρέστε τη λαβή από τη βάση φόρτισης, ενεργοποιήστε τη Sonicare και αφήστε τη να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει. Επαναλάβετε αυτό το βήμα έως ότου να μην είναι δυνατή η ενεργοποίηση της Sonicare.
- 2 Εισαγάγετε ένα ίσιο (κανονικό) κατσαβίδι στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της λαβής και γυρίστε το αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε το κάτω κάλυμμα. (Εικ. 16)
- 3 Κρατήστε τη λαβή ανάποδα και σπρώξτε τον άξονα προς τα κάτω για να ελευθερώσετε τα εσωτερικά μέρη της λαβής (Εικ. 17).
- 4 Εισαγάγετε το κατσαβίδι κάτω από την πλακέτα κυκλώματος, δίπλα στις συνδέσεις της μπαταρίας, και στρίψτε το ώστε να σπάσουν οι συνδέσεις. Αφαιρέστε την πλακέτα κυκλώματος και τραβήξτε την μπαταρία από την πλαστική θήκη (Εικ. 18).

## Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

## Περιορισμοί εγγύησης

Οι όροι της διεθνούς εγγύησης δεν καλύπτουν τα εξής:

- Κεφαλές βουρτσίσματος.
- Βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια, τροποποιήσεις ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
- Φυσική φθορά και ρωγμές, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων, γρατσουνιών, γδαρσιμάτων, αποχρωματισμού ή ξεθωριάσματος.