

**Комплект бебешки
термометър**

SBC SC530/550



PHILIPS

Термометър за бебета

Термометърът за бебета ви позволява удобно и прецизно да измерите температурата на вашето бебе. Термометърът за бебета е проектиран да осигури удобство и безопасност на вашето бебе и съответно и вашето спокойствие. Термометърът е част от пълна гама продукти на Филипс за грижи за бебетата. Прочетете внимателно този справочник преди да използвате термометъра и запазете ръководството за бъдещи справки.

Комплектът на термометъра съдържа следните три продукта:

- Термометър залъгалка, за да можете сигурно да измерите температурата на бебето. Много е удобно да го използвате както за вас, така и вашето бебе.
- Обикновена залъгалка, която позволява на вашето бебе да свикне с формата. Вие можете да използвате тази залъгалка като обикновена такава.
- Цифров термометър с гъвкав връх, който служи за анално измерване на температурата на бебето, за по-голяма сигурност. Проверете дали следват инструкциите за безопасност, когато използвате тези продукти, за да не изложите вашето дете на риск.

Начини за използване на термометъра

Най-удобният начин за измерване температурата на вашето бебе е да използвате термометъра залъгалка, както е описано в това ръководство. Този метод ви дава надеждна индикация. Ако имате нужда от допълнителна сигурност (например ако първата измерена температура е над 38 C), тогава използвайте цифровия термометър с гъвкав връх, за да направите измерванията в ануса (ректално). Имайте в предвид, че оралните измервания обикновено са 0.5 до 1 C по-ниски от действителната температура на тялото.

Температура на детето

Температурата на детето обикновено е между 36.5 и 37.5 C. Имайте в предвид, че температурата на детето може да варира според възрастта, дейността, часа на деня и т.н. Имайте също така в предвид, че някои

болести нямат висока температура като симптом. Измерването на температурата не трябва да бъде заместител на прегледа при вашия лекар. Когато съобщавате температурата на вашето дете на лекар, опишете му метода на измерване.

Важни предпазни мерки

- Никога не закачвайте конци или връвчици към някоя от залъгалките.
- Не завързвайте залъгалката около врата на детето, тъй като тя може да го задуши.
- Преди всяко използване проверете дали биберона на всяка залъгалка е скъсан или напукан и го издърпайте, за да се уверите, че е закрепен стабилно към основата на залъгалката. Не го използвайте ако има дефект или е хлабав.
- След 6 седмици нормално използване изхвърлете обикновената залъгалка.
- Стерилизирайте* или преварете залъгалката след употреба (винаги откачвайте първо термометъра) и я съхранявайте покрита на чисто място.
- Преди първата употреба почистете залъгалката и термометъра.
- За да се предпазите от нараняване, никога не използвайте термометъра на залъгалката отделно.
- Съхранявайте термометъра на недостъпно за децата ви място; това не е играчка.
- Възрастен човек трябва да наблюдава използването на термометъра.
- Не използвайте термометъра ако на екрана се появи . Това означава, че батерията е изхабена и измерванията ще бъдат неточни.
- Не използвайте термометъра залъгалка като обикновена залъгалка тъй като това намалява неговия живот.

Грижи за термометъра

Термометрите са прецизни инструменти и трябва да се грижите за тях внимателно. Не ги изпускате или не ги подлагайте на удари или висока температура. Използвайте ги само за измерване температурата на човешкото тяло.

- Не съхранявайте термометъра на директна слънчева светлина или в близост до нагревател.
- Никога не стерилизирайте или преварявайте термометъра залъгалка.
- Не го измивайте в миялна машина.
- Не го поставяйте в микровълнова печка или микровълнов стерилизатор.
- Никога не използвайте химически препарати.
- Не сгъвайте или разглобявайте измервателния уред.

* Стерилизиране означава унищожаване на вредните бактерии при температура 95 C за повече от 3 минути. Това не означава стерилизиране според клиничните стандарти. Стерилизаторът за бебешки бутилки на Филипс е подходящ за стерилизиране на биберона, основата и обвивката.

Термометър залъгалка

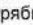
Най-удобният начин за измерване температурата на бебето е с помощта на термометъра залъгалка. Това е и най-удобният начин за бебето. Не използвайте този термометър 30 минути след като бебето е приело топли или студени напитки, тъй като това може да доведе до грешка в измерванията.

- За да включите термометъра натиснете бутона on/off (A-1). (На екрана (A-2) се появява „L“ и започва да мига „C“).
- Поставете залъгалката в устата на бебето и изчакайте докато термометъра изпускуа 4 пъти.
- На екрана се появява измерената температура, а символът C свети непрекъснато.
- Извадете залъгалката от устата на бебето.
- За да изключите термометъра натиснете бутона on/off. (По този начин пестите енергия. Термометърът се изключва автоматично след 10 минути).

Проверяване на последната измерена температура

Ако желаете да сравните температурите, можете да проверите каква е била последната измерена температура. Това може да бъде направено само един път преди ново измерване. Натиснете и задръжте бутона on/off за 3 секунди. На екрана се появява последната измерена температура и „M“ за паметта. Когато освободите бутона температурата се изтрива.

Индикатор за изхабени батерии

Този термометър залъгалка има трайни батерии, които трябва да издържат около 2 до 3 години. Ако на екрана се появи , значи батерията е изхабена и термометъра е достигнал края на живота си. Повече не го използвайте.

Преди да изхвърлите термометъра, извадете батерията и я изхвърлете на подходящо място. (За да получите достъп до батерията, откачете малкото капаче).

Почистване на залъгалката

Биберона, основата и обвивката може да се стерилизират* или изварят. Никога не стерилизирайте или преварявайте измервателния уред. Преди да го почистите винаги изваждайте измервателния уред от биберона и основата по следния начин (виж фигура B):

- Завъртете измервателния уред на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка по отношение на основата.
- Издърпайте измервателния уред от биберона и основата. (Внимавайте да не счупите върха на термометъра).

След като изварите биберона, основата и обвивката, изцедете водата и оставете термометъра да изсъхне.

За да почистите измервателния уред го избършете с влажен парцал.

Сглобете отново залъгалката както следва (виж фигура С):

- Подравнете прорезите на основата със съответните издатини на измервателния уред.
- Вкарайте измервателния уред в основата като се уверите, че върха на термометъра влиза в джоба в биберона.
- Завъртете термометъра на 90 градуса по часовниковата стрелка, за да го застопорите.

* Стерилизиране означава унищожаване на вредните бактерии при температура 95 С за повече от 3 минути. Това не означава стерилизиране според клиничните стандарти. Стерилизаторът за бебешки бутилки на Филипс е подходящ за стерилизиране на биберона, основата и обвивката.

Цифров термометър с гъвкав връх

Термометърът залъгалка е прецизен като цифровия термометър с гъвкав връх и е удобен за използване. Тъй като аналното измерване е по-прецизно от оралното, цифровия термометър с гъвкав връх ви дава възможност да се подсигурите.

Извадете цифровия термометър с гъвкав връх от кутиятата. Използвайте специални хигиенични обвивки, за да покриете върха на термометъра (такива се продават в повечето аптеки).

За да измерите анално температурата на бебето:

- Смажете върха на термометъра (или хигиенната обвивка) с водно разтворимо желе. Не използвайте друго тип желе.
- Натиснете бутона on/off (A-1), за да включите термометъра. (На екрана (A-2) се появява „L“ и започва да свети „С“).
- Поставете бебето по корем или на една страна.
- С една ръка разтворете дупето на бебето, а с другата леко вкарайте термометъра в ректума, на не повече от 12мм. Ако срещнете някакво съпротивление, спрете незабавно.
- Задръжте бебето, за да не може да се завърти докато термометъра е вкаран в ануса.

Преди да извадите термометъра, изчакайте да избипка 4 пъти.

- Извадете термометъра и прочетете екрана.
- За да изключите термометъра натиснете бутона on/off. (По този начин пестите енергия. Термометърът се изключва автоматично след 10 минути).

Проверяване на последната измерена температура

Ако желаете да сравните температурите, можете да проверите каква е била последната измерена температура. Това може да бъде направено само един път преди ново измерване. Натиснете и задръжте бутона on/off за 3 секунди. На екрана се появява последната измерена температура и „M“ за паметта. Когато освободите бутона температурата се изтрива.


Измерване температурата на по-големи деца

При по-големи деца и възрастни може да се използва цифровия термометър с гъвкав връх за измерване на температурата в устата (орално) или под мишницата (най-ненадеждния метод). Ако термометърът е използван ректално без хигиенична обвивка, ние не препоръчваме използването му за орални измервания.

Почистване

След всяка употреба почиствайте термометъра. Никога не стерилизирайте или преварявайте термометъра. При домашна употреба, избършете термометъра с мек, влажен парцал или го измийте с вода. Термометърът е водоустойчив. Не го измивайте в миялна машина.

Подмяна на батерията

Този термометър има трайни батерии, които трябва да издържат около 2 до 3 години. Ако на екрана се появи , значи батерията е изхабена. Преди да използвате термометъра отново, подменете батерията по следния начин:

- Махнете капачето на батерията.
- Използвайте изолиран инструмент, за да извадите батерията (клетка за зъби например).
- Вкарайте нова батерия (LR41) с положителния край нагоре.
- Закрепете отново капачето.

Внимание

Поглъщането на батерия тип копче може да бъде изключително опасно.

Изхвърлете батерията по подходящ начин.

Не изхвърляйте батерията в огън, тъй като може да експлодира.

Никога не се опитвайте да презареждате батерията.

Технически спецификации

	Цифров термометър с гъвкав връх	Термометър залъгалка
Размери:	133 (L) x 21 (W) x 12 (H)mm	48 (L) x 55 (W) x 36 (H)mm
Тегло:	9.5 гр.	15 гр.
Консумация:	0.2mW	
Батерия:	1.55 VCD (LR41)	
Живот на батерията:	> 100 часа използване	
Диапазон на измерванията:	32 С до 44 С	
Точност:	+0.1 С в диапазона 35 С до 38 С +- 0.2 С в останалия диапазон	
Размер на биберона:	1 (подходящ за новородени бебета).	

Отговаря на стандартите MDD93/42/ЕЕС.