


**PHILIPS**

VisaCare

SC6240





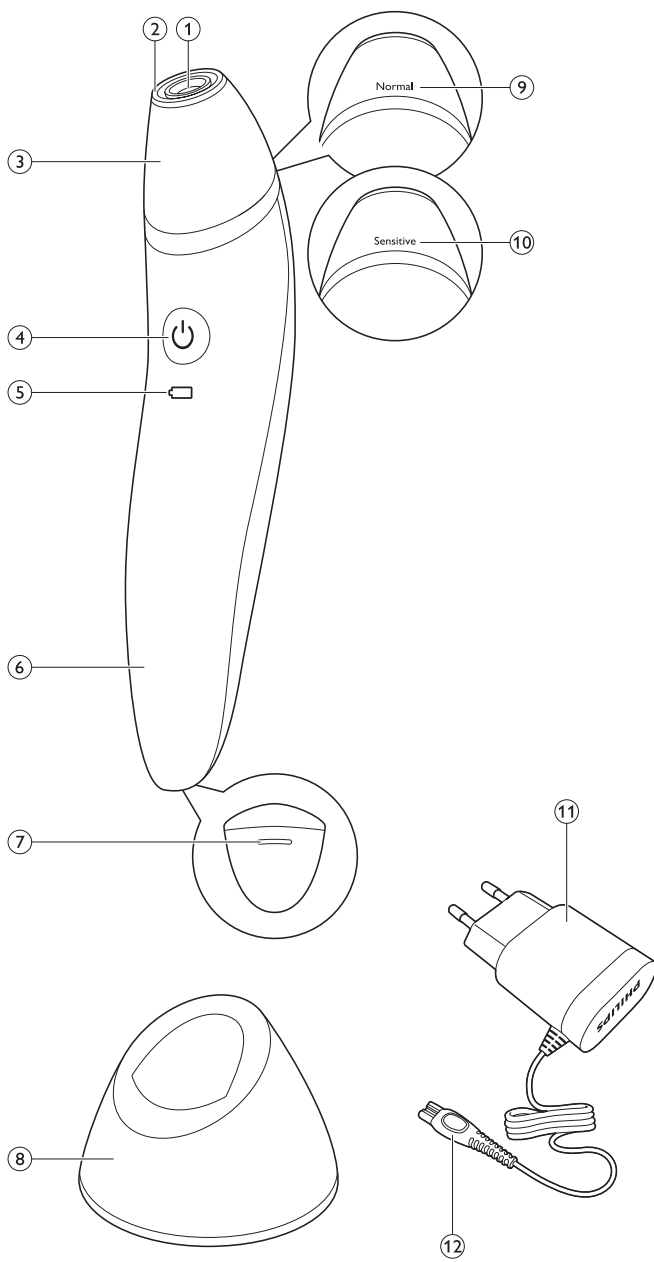



# Slovenščina 6

## Uvod

Čestitamo za nakup in pozdravljeni pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Kaj je VisaCare in kako lahko pomaga vaši koži? Staranje, pomanjkanje spanca, čustveni stres ali okoljski elementi negativno vplivajo na kožo. Ko na koži opazite prve znake staranja in si ne opomore več tako hitro, koža potrebuje dodatno nego in pozornost. Zato smo razvili napravo VisaCare, ki predstavlja svež pristop k odpravljanju prvih znakov staranja in pomlajevanju kože danes in jutri. Že po prvi uporabi ali po nekaj negah (odvisno od tipa kože) lahko opazite učinke, kot je bolj gladka in obnovljena koža. Učinki, kot sta čvrsta koža in enakomernejši ten, se lahko pokažejo po 4–6 tednih.

Napravo VisaCare lahko uporabljate v udobju lastnega doma in tako vedno poskrbite, da je koža bolj gladka, čvrsta in obnovljena. VisaCare ima dvojni sistem delovanja, ki hkrati izvaja piling in kožo masira. Sistem je učinkovitejši in bolj nadzorovan kot pri ročnem pilingu. Naprava VisaCare je zasnovana, da izpopolni vašo dnevno rutino. Uporabljajte jo po čiščenju kože in pred nanosom hranilne maske ali dnevne ali nočne kreme. Po uporabi bo koža boljše vpila masko ali kremo. Ste pripravljeni? Napravo VisaCare uporabljajte doma dvakrat tedensko in vaša koža bo vidno lepša.

## Kako deluje Philipsova tehnologija za mikrodermoabrazijsko nego

Philips VisaCare ponuja sistem DualAction Air Lift & Exfoliation, ki kožo med izvajanjem pilinga tudi masira. Tako stimulira obnavljanje povrhnjice za bolj čvrsto, gladko in vidno sijočo kožo.

- 1 Konica za piling obnavlja kožo in stimulira naravni postopek obnavljanja celic, zato bo koža bolj gladka in čvrsta z izboljšano teksturo. Nežno odstranjuje grobe nepravilnosti in luske ter obnavlja kožo in jo pripravi na učinkovito vpijanje vaše najljubše kreme po negi.
- 2 Sistem Air Lift System™ nežno masira in stimulira kožo ter spodbuja krvni obtok, hkrati pa odstranjuje odmrle celice in kožo poživlja.

## Splošni opis (sl. 1)

- 1 Filter
- 2 Obroček za piling
- 3 Konica za mikrodermoabrazijsko nego
- 4 Gumb za vklop/izklop
- 5 Lučka za polnjenje in kazalnik skoraj prazne baterije
- 6 Ročaj
- 7 Odvod zraka
- 8 Polnilno stojalo
- 9 Običajna konica za redno uporabo
- 10 Nežna konica za nego občutljive kože
- 11 Napajalnik
- 12 Manjši vtič

- Torbica (ni prikazano)
- Čistilna ščetka (ni prikazano)

## Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

## Nevarnost



- Napajalnika ne smete zmočiti.
- Aparata ne polnite v mokrem okolju (npr. v bližini polne kopalne kadi, delujoče prhe ali v bližini napolnjenega bazena).

## Opozorilo



- Za polnjenje baterije uporabite samo snemljivi napajalnik (SSW-2600), ki ste ga dobili z aparatom.
- Aparata naj ne uporabljajo otroci in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se z aparatom ne bodo igrali otroci.
- Če je aparat ali napajalnik poškodovan ali pokvarjen, ga ne uporabljajte, da se ne bi poškodovali.
- V napajalnik je vgrajen transformator. Odstranitev in zamenjava napajalnika z drugim nista dovoljeni, saj je to lahko nevarno.

- Če se adapter poškoduje, ga morate zamenjati z originalnim nadomestnim delom, da se izognete nevarnosti.
- Naprave ne uporabljajte, če je konica za nego poškodovana, zlomljena, razpokana ali umazana. Pred uporabo konico vedno preglejte. Če niste prepričani o njenem stanju, jo zamenjajte.
- V vtičnico za majhen vtič na napravi ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne povzročite kratkega stika.
- Aparat vsebuje magnet. Magneti ne smejo biti v bližini srčnih spodbujevalnikov. Ljudje, ki imajo srčni spodbujevalnik ali kak drug vsadek, ne smejo biti v neposredni bližini magnetov. Preden uporabijo magnete ali pridejo v stik z njimi, se morajo o tem posvetovati z zdravnikom specialistom.

## Pozor

- Aparat lahko uporabljate le za masiranje in nežno odstranjevanje mrtve povrhnjice, da pospešite običajno obnavljanje kože.
- Naprave ne smete uporabljati pogosteje kot dvakrat tedensko, saj lahko kožo razdražite.
- Aparata ne uporabljajte skupaj s kremami za piling kože in s kemičnimi ali mehanskimi pilingi. Tako lahko poškodujete aparat in kožo.
- Aparat uporabljajte, polnite in shranjujte pri temperaturah med 5 °C in 35 °C.
- Aparat popolnoma napolnite vsaj vsake 3 mesece, da ohranite življenjsko dobo baterije.



- VisaCare izboljša vpijanje krem in mask. Ker koža bolje vpija, se lahko pojavijo negativne kožne reakcije. Svetujemo vam, da v prvih 2 do 4 tednih uporabe naprave VisaCare ne menjate kreme, ki jo uporabljate za nego kože. Ko po tem času uporabite drugo kremo, jo najprej preizkusite na majhnem delu kože obraza. Če se po nanosu kreme pojavi negativna reakcija na predelu kože, ki ste ga negovali z napravo VisaCare, kreme ne uporabljajte več. Ko napravo uporabite prvič ali nadaljujete po več kot 2-tedenski prekinitev, najprej uporabite nežno konico. Tako boste kožo pripravili na nego s to napravo.

## Kontraindikacije in druga opozorila

Naprava je namenjena odpravljanju prvih znakov staranja kože na obrazu. Zaradi zunanjih in notranjih dejavnikov se povrhnjica s staranjem tanjša, zato je koža bolj groba in znaki poškodb, ki jih povzročata izpostavljenost soncu, so vidnejši. Naprava se uporablja na koži obraza (razen predela nad očmi in pod njimi).

### Te naprave ne uporabljajte:

- Če imate na predelu, kjer boste uporabljali napravo, okužbe kože, odprte rane, izpuščaje, opekline, sončne opekline, vnetje, ekcem, luskavico, rdečico, teleangiektazijo (kuperozo ali popokane žilice), občutljivo kožo, aktivno okužbo, kot je herpes, ali aktiven izbruh aken.
- Če imate na predelu, kjer boste uporabljali napravo, velika znamenja, tatuje, ognjena znamenja, trajna ličila ali razdraženo kožo.
- Če si vaša koža še ni opomogla od kozmetičnega posega, kot je kemični ali mehanski piling, laserska abrazija, frakcijska laserska nega, mezoterapija ali kakšen drug poseg z dermalnimi polnili, ki ste ga imeli v zadnjih dveh tednih.
- Če jemljete zdravila, ki vplivajo na kožo, kot so steroidi ali zdravila proti aknam (Accutane, Isotretinoine ali Roaccutane). Posvetujte se z zdravnikom.
- Če imate bradavice, jih z napravo ne skušajte odstraniti. Tako bi se bradavice lahko razširile.
- Če imate brazgotine, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom ali dermatologom.
- Skupaj s kakršnim koli drugim sistemom za domačo rabo, ki se uporablja za aktivni piling kože.

### Splošni nasveti

- Na predele kože, ki ste jih negovali z napravo, vsaj 3 dni nanašajte sončno kremo z zaščitnim faktorjem (SPF) 30 ali višjim.

- Če imate hudo kožno bolezen (med drugim melanom, karcinom bazalnih celic, aktinično keratozo, melazmo, sistemski eritematozni lupus, porfirijo, motnje pri strjevanju krvi in težave s kolagenom, kot so keloidne brazgotine, čezmerno nastajanje brazgotin in slabo celjenje ran v preteklosti), se pred začetkom uporabe naprave posvetujte z zdravnikom.
- Če nameravate veliko časa preživeti na soncu (na primer med poletnim dopustom), vam priporočamo, da en teden pred dopustom in dokler se izpostavljate soncu prenehate uporabljati konico za učvrstilno nego in uporabljate samo konico za osvetlitveno nego.

## Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsova naprava ustreza vsem upoštevanim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

## Polnjenje

Opomba: Priporočamo, da napravo napolnite po vsaki uporabi.


Opomba: Napravo pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe polnite 8 ur.


## Polnjenje naprave

Opomba: Napravo lahko uporabljate, preden se baterija popolnoma napolni, vendar v tem primeru njena učinkovitost in čas delovanja ne bosta najboljša.


Opomba: Polnjenje običajno traja približno 8 ur. Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo lahko uporabljate do 30 minut, ne da bi jo priklopili na električno omrežje.

- 1 Prepričajte se, da je aparat izklopljen.
- 2 Vstavite manjši vtič v vtičnico polnilnega stojala in priključite napajalnik v omrežno vtičnico.

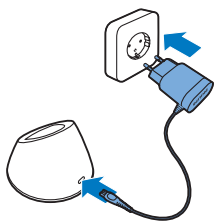

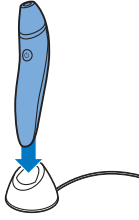

**3** Napravo postavite na polnilno stojalo.

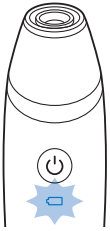

- Lučka za polnjenje utripa belo, kar pomeni, da se naprava polni.



- Ko je baterija napolnjena, lučka za polnjenje neprekinjeno sveti belo. Po približno 30 minutah lučka za polnjenje zaradi varčevanja z energijo neha svetiti.

## Kazalnik skoraj prazne baterije

Ko je baterija skoraj prazna, lučka za polnjenje med uporabo in po izklopu naprave 4 sekunde utripa oranžno. Baterija ima še vedno dovolj energije za celovito 5-minutno uporabo. Ko je baterija popolnoma prazna, se naprava samodejno izklopi in lučka za polnjenje zelo hitro utripa oranžno.

## Priprava za uporabo

Napravo pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe polnite 8 ur.

### Priprava

Pred uporabo naprave obraz vedno očistite in ga nežno obrišite do suhega.

Opomba: Naprava je namenjena izključno za suho uporabo. Ne uporabljajte je na mokrem obrazu, v kadi ali pod prho.

### Nasveti za uporabo

VisaCare ima dve različni konici za nego:

- Običajna konica za redno uporabo.
- Nežna konica za nego občutljive kože.

Priporočamo, da pri začetnih negah uporabljate nežno konico, da vidite, kako se koža odziva. Če se koža dobro odzove na nego z nežno konico, lahko poskusite z običajno konico. Normalne in neželene kožne reakcije so opisane drugje v tem uporabniškem priročniku.

Opomba: Uporabite QR-kodo na platnici ali vpišite povezavo in si oglejte spletni videoposnetek z navodili za ustrezno uporabo naprave.

## Uporaba naprave

**Opozorilo: Če domnevate, da je naprava poškodovana (na primer zaradi padca ali udarca), natančno preglejte konico. Če je konica poškodovana, jo zamenjajte. Poškodovane konice ne uporabljajte, ker bi lahko opraskala kožo.**

**Opozorilo: Naprave ne uporabljajte brez konice, ker to ne koristi koži in lahko povzroči neželjeno kožno reakcijo.**

**Opozorilo: Naprave ne uporabljajte na velikih znamenjih, tatujih, ognjenih znamenjih in trajnih ličilih.**

Nasvet: Priporočamo, da napravo uporabljate zvečer. Tako boste preprečili, da bi bile morebitne kožne reakcije vidne čez dan. Rahla pordelost ter občutek toplote in ščemenja sta normalna in običajno izgineta v 1 uri.

Opomba: za najboljši učinek uporabljajte napravo dvakrat tedensko. Naprave ne smete uporabljati pogosteje, ker bi lahko prišlo do draženja kože.



**1** Napravo vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.



**2** Pri prvi uporabi naprave preizkusite konico na podlakti, preden jo uporabite na obrazu. Napravo enkrat premaknite po koži in nato počakajte približno eno uro. Če se morebitna kožna reakcija po tem času ublaži, lahko konico brez skrbi uporabljate na obrazu.

Opomba: Pred uporabo vedno preverite, ali je konica poškodovana. Poškodovana konica lahko opraska kožo. Če je konica poškodovana, jo zamenjajte.

Opomba: Naprave ne uporabljajte brez konice, ker to ne koristi koži in lahko povzroči neželjeno kožno reakcijo.

**3** Konico postavite na obraz tako, da čutite, kako se prisesa na kožo. Konica mora biti vedno v popolnem stiku s kožo na delu obraza, ki ga obdelujete. Vendar konice ne smete premočno pritiskati ob kožo.

- 4 Konico nežno premikajte v ravnih linijah. Oglejte si prvo sliko o uporabi naprave na predelih obraza, ki je na voljo na zloženki na zadnji strani tega priročnika.

Nasvet: S prosto roko napnite in držite kožo. Napravo premikajte stran od roke. Tako boste lažje dosegli pravilno sesanje, zlasti na sencah in licih.

Opomba: Naprave ne uporabljajte na velikih znamenjih, tatujih, ognjenih znamenjih in trajnih ličilih.

Opomba: Naprave ne uporabljajte na predelu pod očmi ali nad očmi, saj je tam koža tanka in občutljiva. Pri obdelovanju gubic ob očesnih kotičkih položite prst druge roke na kot veke in napravo premikajte stran od prsta proti sencam.

Opomba: Ko konico položite na kožo, je ne držite na enem mestu.

- 5 Glede na vrsto konice in stanje kože večkrat premaknite napravo po vsakem predelu:
- Prva uporaba: enkrat ali dvakrat premaknite nežno konico prek vsakega predela.
  - Po nekaj uporabah: od 4- do 6-krat premaknite nežno konico prek vsakega predela ali pa začnite uporabljati običajno konico. Če uporabljate običajno konico, jo premaknite prek vsakega predela od 3- do 4-krat. Ko se koža navadi na napravo, jo premikajte prek vsakega predela od 4- do 6-krat.

- 6 Ko obdelate vse predele, pritisnite gumb za vklop/izklop, da napravo izklopite. Celovit poseg traja približno 5 minut.

Glede na tip vaše kože lahko občutite toploto in ščemenje. Lahko se pojavi tudi rahla rdečica. To je samo začasno in mora izginiti v 5 do 10 minutah.



Nasvet: na predelih, kjer težje dosežete popoln stik s kožo (na primer na čelu), poskusite napravo držati drugače. Poskusite z navpičnimi in vodoravnimi premiki, da dosežete ustrezen stik naprave s kožo. Lahko tudi držite roko pri miru in namesto nje premikate glavo.

**Pozor: Če domnevate, da je naprava poškodovana (na primer zaradi padca ali udarca), natančno preglejte konico. Če je konica poškodovana, jo zamenjajte. Poškodovane konice ne uporabljajte, saj bi lahko opraskala kožo.**


## Po uporabi

Po uporabi naprave nanesite hranilno masko ali dnevno ali nočno kremo. Če greste na prosto, uporabite zaščito pred soncem. Naslednje 3 dni ne uporabljajte nobene druge metode za mehanski ali kemijski piling. Ne hodite na elektrolizo ali voskanje obraza in ne uporabljajte depilatorjev. Ličila lahko nanesete takoj po uporabi naprave.


**Pozor: Naprave ne potaplajte v vodo.**

**Opozorilo: Ročaja ali konice naprave nikoli ne čistite s čistilnimi gobami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.**


Opomba: Konico očistite po vsaki uporabi zaradi higienskih razlogov in za preprečitev zamašitve filtra. Za čiščenje konice uporabljajte samo sredstvo za pomivanje posode ali alkoholno raztopino (največ 70-odstotno).

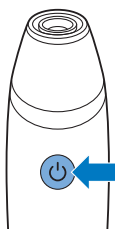

1 Napravo izklopite.

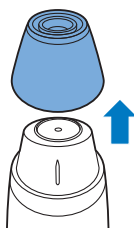

2 Odstranite konico z naprave.

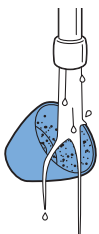

3 Konico očistite pod tekočo vročo vodo (največ 70 °C) in z nekaj sredstva za pomivanje posode.

Nasvet: Očistite jo lahko tudi s čistilno ščetko.

Nasvet: Če je obroček za piling umazan, konico za 5 do 10 minut namočite v vročo vodo z nekaj sredstva za pomivanje posode ali v alkoholno raztopino.

Opomba: Pri čiščenju filtra naj bo konica obrnjena navzdol, da sperete vso preostalo umazanijo v filtru.

4 Konico obrišite do suhega s krpo, ki ne pušča vlaken, ali počakajte, da se posuši na zraku. Ko je suha, jo znova namestite na ročaj.

5 Ročaj očistite z vlažno krpo.

6 Polnilno stojalo očistite z vlažno krpo.

Nevarnost: Polnilnega stojala in napajalnika ne močite. Nikoli ju ne smete potapljati v vodo ali spirati pod pipo.



## Shranjevanje

Napravo shranjujte z nameščeno konico na polnilnem stojalu ali v torbici.

Nasvet: Konico, ki jo najpogosteje uporabljate, pustite nameščeno na napravi, drugo konico pa shranite v vrečko. Tako se boste lažje držali načrta uporabe.

Opomba: Mokre konice ne shranjujte na napravi ali v torbici.

## Zamenjava

Za najboljše rezultate vam priporočamo, da vsakih šest mesecev zamenjate konici (ali prej, če je abrazivna struktura deformirana ali poškodovana). Nadomestne konice so na voljo na našem spletnem mestu. Konico prepoznate po kodi izdelka, ki jo najdete na notranji strani konice.

## Naročanje dodatne opreme

Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na spletni strani **[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** ali pri Philipsovem prodajalcu. Lahko se tudi obrnete na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (podatki za stik so na mednarodnem garancijskem listu).

## Recikliranje



- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki (2012/19/EU).




- Ta simbol pomeni, da je v izdelek vgrajena akumulatorska baterija, ki je ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki (2006/66/ES). Izdelek odnesite na uradno zbirno mesto ali Philipsov servisni center, kjer bodo strokovnjaki odstranili akumulatorsko baterijo.
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov ter akumulatorskih baterij. S pravilnim odlaganjem boste pomagali preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.

## Odstranitev akumulatorske baterije

**Akumulatorske baterije odstranite samo, ko boste aparat zavrgli. Pred odstranjevanjem baterij se prepričajte, da je aparat izključen iz omrežne vtičnice in da so baterije popolnoma prazne.**

**Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.**

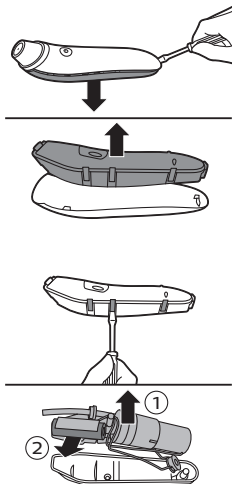

- 1 Z izvijačem odstranite zadnjo in sprednjo ploščo aparata in izvlecite notranje ohišje aparata.
- 2 Z izvijačem iz notranjega ohišja odstranite zaponki.
- 3 Iz notranjega ohišja (1) odstranite elektronske dele in nato odstranite akumulatorsko baterijo (2).

## Garancija in podpora

Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ali preberite mednarodni garancijski list.

## Odpravljanje težav

V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Rešitev
Ne vem, ali je naprava primerna za uporabo na moji koži.	Preverite, ali je naprava primerna za vašo kožo.
Naprava se ne polni.	Prepričajte se, da je vtičnica, v katero ste priključili napravo, pod napetostjo. Napetost, ki je navedena na napravi, mora ustrezati napetosti lokalnega električnega omrežja. Preverite, ali ste napravo pravilno namestili na stojalo. Če uporabljate vtičnico omarice v kopalnici, boste morda morali prižgati luč, da bo vtičnica pod napetostjo. Če lučka na napravi še vedno ne začne svetiti ali če se naprava še vedno ne polni, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Naprava med polnjenjem ne deluje.	To je varnostni ukrep. Naprava ni zasnovana, da bi delovala med polnjenjem. Za 5 minut izvajanja nege na obrazu napravo polnite približno 1 uro.
Če napravo uporabljam na vlažni koži, rezultati niso najboljši.	Napravo uporabljajte samo na suhi koži. Zasnovana je tako, da najbolje deluje na suhi koži.



**Težava****Rešitev**

Na moji koži se po uporabi naprave pojavijo reakcije.

Nemudoma po uporabi naprave se lahko na koži pojavi rahla rdečica. Med uporabo lahko občutite toploto in ščemenje. Ti učinki običajno izginejo v nekaj minutah in so ponavadi prijetni. Vaša koža bo morda suha, dlje časa rdeča ali zatečena in se bo luščila. To lahko pomeni, da ste napravo premočno pritiskali na obraz ali ste ta predel prevečkrat obdelali. Pri naslednji negi naprave ne pritiskajte tako močno ob kožo ali ta predel obdelajte manjkrat. Redko lahko naprava povzroči modrico ali mehur, opraska kožo ali spremeni pigmentacijo. Skoraj vse kožne reakcije izginejo v enem tednu, spremembe pigmentacije pa se zmanjšajo v nekaj tednih ali mesecih. Za preprečitev morebitnih neželenih učinkov po negi uporabite dnevno kremo z zaščitnim faktorjem ali kremo za sončenje. To pomaga preprečiti sončne opekline. Naprava je bila preizkušena in potrjena za varno, če se uporablja skladno z navodili v priročniku za uporabo. Zdravila ali izdelki in njihovi možni neželeni učinki vplivajo na posamezne ljudi na različne načine. Ker vedno obstaja možnost, da se pri uporabi te naprave ali katerega koli drugega izdelka pojavi redok ali predhodno neznan neželeni učinek, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom, če se pojavi neželen učinek, ki zgoraj ni omenjen.

Napravo težko premikam po koži/ne čutim, da bi se prisesala/učinek je šibkejši v primerjavi s prejšnjimi uporabami naprave.

Preverite, ali je filter zamašen. Očistite konico tako, da jo sperete pod tekočo vodo. Če je obroček za piling umazan, konico za 5 do 10 minut namočite v vročo vodo z nekaj sredstva za pomivanje posode. Očistite jo lahko tudi s čistilno ščetko. Pri čiščenju filtra naj bo konica obrnjena navzdol, da sperete vso preostalo umazanijo iz filtra. Konicu obrišite do suhega s krpo, ki ne pušča vlaken, ali počakajte, da se posuši na zraku. Preverite, ali občutite sesanje, ko konica ni nameščena: odstranite konico in nato vklopite napravo. Ko položite prst na luknjo, morate občutiti sesanje. Če sesanja ne občutite, je naprava morda poškodovana. Obrnite se na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Na čelu težko ohranjam napravo prisesano na kožo.

Poskusite napravo držati na različne načine, da najdete pravi kot med konico in čelom za vzdrževanje stalnega stika s kožo. Napravo počasi premikajte po čelu. Lahko tudi poskusite držati roko pri miru in namesto nje premikati glavo.

Ne vem, kdaj lahko začnem uporabljati običajno konico.

Ko pri uporabi nežne konice ni več neželenih učinkov, lahko začnete uporabljati običajno konico. Ko konico uporabite prvič, se bodo na koži morda pojavile drugačne reakcije. Koža potrebuje nekaj časa, da se navadi na novo konico.











© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
4222.100.7622.2