

# PHILIPS

## AVENT

### Nipplette™

Nekirurški pristup

Za ravne ili uvučene bradavice

1 Nipplette i 2 jastučića za dojke



SCF152/01



## Jednostavno, učinkovito rješenje za uvučene bradavice

### Klinički dokazani rezultati\*

Nipplette™ olakšava dojenje majkama s ravnim ili uvučenim bradavicama. Taj jedinstven, revolucionaran proizvod predstavlja jednostavno, neinvazivno i dugotrajno rješenje. Nakon nekoliko tjedana neprekidne upotrebe, bradavica će ostati uzdignuta.

#### **Jednostavno i ugodno**

- Uredaj za ravne ili uvučene bradavice
- Jednostavan postupak
- Dodatne informacije

#### **Jednostavno i diskretno – za bradavice svih veličina**

- Idealno, ranije ili unutar prvih 6 mjeseci trudnoće

#### **Neinvazivno – uz nježno sisanje**

- Klinički dokazani rezultati

# Istaknute znač.

## Za ravne ili uvučene bradavice




Uvučene ili nedovoljno izvučene bradavice kod približno 10 % žena uzrokuju psihološke poteškoće te otežavaju dojenje majkama i bebama. Beba bi sisanjem trebala izvući bradavicu. Ako se to ne dogodi, Nipplette™ je jednostavno, ugodno rješenje koje može pomoći. Uređaj omogućuje ženama s ravnim ili uvučenim bradavicama ugodno dojenje bez potrebe za invazivnim zahvatima\*. Sastoji se od prozirnog odljeva bradavice s brtvom koji je povezan s priključkom za špricu i ventilom.

### Preporučena upotreba

U idealnim slučajevima, Nipplette treba upotrebljavati prije trudnoće i to po 8 sati danju ili noću\*. Ako dojke nisu previše osjetljive, uređaj možete upotrebljavati i u prvih šest mjeseci trudnoće kako biste osigurali trajnu korekciju ili nakon rođenja djeteta, po nekoliko minuta prije svakog hranjenja. Nipplette isisava bradavicu, omogućujući bebi jednostavno zahvaćanje i uspostavljanje rutine dojenja tijekom prvih nekoliko dana. Po završetku dojenja Nipplette možete upotrebljavati s vremena na vrijeme kako biste osigurali trajnu kozmetičku korekciju.

## Nježno sisanje

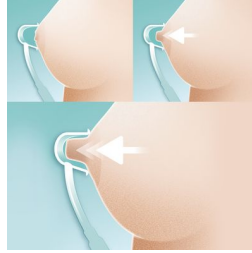

Čašicu jednom rukom držite iznad areole bradavice i izvučite zrak pomoću šprice od 5 ml kako biste u nju usisali bradavicu. Korisnica kontrolira usis, a time i snagu povlačenja bradavice. Po izvlačenju bradavice, korisnica nakon pažljivog razdvajanja šprice od ventila može nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima, diskretno noseći Nipplette u grudnjaku. Maksimalno potičemo prvotnu upotrebu\*.

### Dokazana klinička uspješnost

Kliničkim ispitivanjima\* potvrđeno je kako Nipplette uspješno i trajno korigira ravne ili uvučene bradavice, bez obzira na to je li stanje postojalo od puberteta ili je u pitanju posljedica operacija smanjenja dojki. Pod uvjetom da nisu smanjivale dojke, sve trudnice koje su se brinule oko dojenja naposljetku su uspješno dojile. Trajna korekcija obično nastaje nakon jednog do tri mjeseca neprekidne upotrebe.

### Dodatne informacije

Nipplette neće funkcionirati nakon što vam naiđe mlijeko. Međutim, beba će dotad već moći uspješno sisati bradavicu.

# Specifikacije

## Država podrijetla

Ujedinjeno Kraljevstvo

## Što se nalazi u paketu

Nipplette: 1 kom.

Jastučići za grudi za jednokratnu upotrebu: 2 kom.

## Dizajn

Diskretna dizajn

## Faze razvoja

Faze: Prije trudnoće, 0 - 6 mjeseci, Početna faza dojenja

## Jednostavnost uporabe

Jednostavno se skriva ispod odjeće: Vakuum se otpušta pritiskom na štrcaljku

## Jednostavno čišćenje

Čišćenje u vrućoj vodi sa sredstvom za pranje

## Funkcije

Rješenje za uvučene bradavice: Nježno povlačite

## Materijal

Nipplette: Polipropilen

Jastučići za grudi: Dermatološki testirano

