

# PHILIPS

## AVENT

### Nipplette™

Un enfoque no quirúrgico

Para pezones planos o invertidos

2 Nipplette y 2 discos absorbentes



SCF152/02



## Una solución sencilla y efectiva para pezones invertidos

### Resultados clínicamente comprobados\*

Nipplette™ ayuda a las madres con pezones invertidos o planos para que puedan amamantar. Este instrumento único y revolucionario proporciona una solución fácil, no quirúrgica y de larga duración. Durante algunas semanas de uso continuo, el pezón se mantendrá erecto.

#### Sencillo y cómodo

- Un dispositivo para pezones planos o invertidos
- Un procedimiento sencillo
- Información adicional

#### Simple y discreto: apropiado para pezones de cualquier tamaño


- El uso ideal es antes de los primeros 6 meses de embarazo o durante estos

#### Sin cirugía, mediante una suave succión

- Resultados clínicamente probados

## Destacados

### Para pezones planos o invertidos

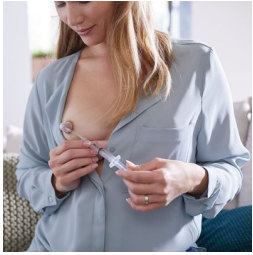


Los pezones invertidos o no protráctiles afectan hasta a un 10% de las mujeres, provocan trastornos psicológicos y hacen que la lactancia materna resulte difícil para la madre y el bebé. El patrón de succión del bebé debería extraer el pezón. Si no es así, el Nipplette™ es una solución sencilla y cómoda que puede ser de ayuda. Este dispositivo permite a las mujeres con pezones planos o invertidos dar el pecho de forma cómoda sin necesidad de cirugía invasiva\*. Se compone de un molde de pezón transparente con un borde de sellado conectado a una válvula y un conector de jeringa.

### Cuándo se recomienda su uso

Idealmente, el Nipplette se debería utilizar antes del embarazo y durante períodos de 8 horas por día o noche\*. Si los pechos no son tan sensibles, el dispositivo también se puede utilizar durante los primeros seis meses de embarazo para lograr una corrección permanente o después del nacimiento del bebé, durante unos minutos antes de amamantar. El Nipplette succiona el pezón para que el bebé pueda sujetarse fácilmente y permite establecer una rutina de amamantamiento durante los primeros días. Después de terminar con el amamantamiento, la madre puede llevar a cabo una corrección cosmética permanente y, si este es el caso, puede seguir usando el Nipplette de vez en cuando.

### Succión suave

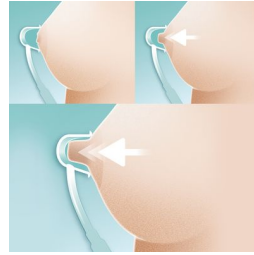

Se debe sostener el vaso sobre la areola del pezón con una mano y sacar al aire con el uso de una jeringa de 5 ml, para poder que succionar el pezón con el dispositivo. El usuario tiene el control de la succión y puede tirar del pezón de manera firme y cómoda. Cuando se estira el pezón, el usuario, después de separar cuidadosamente la jeringa de la válvula, puede continuar con sus actividades normales y seguir usando el dispositivo Nipplette discretamente dentro del brasier. Se recomienda realizar el primer uso en la medida de lo posible\*.

### Éxito clínico probado

Los ensayos clínicos\* que se realizaron en el Nipplette fueron exitosos, ya que lograron una corrección permanente de los pezones planos e invertidos, ya sea que la condición haya estado presente desde la pubertad o si fue provocada por una cirugía de reducción mamaria. Debido a que las mujeres afectadas no se sometieron a una cirugía mamaria, todas las pacientes embarazadas que estaban preocupadas por la lactancia pudieron seguir amamantando con éxito. Se logró una corrección permanente en un tiempo de uso continuo de uno a tres meses.

### Información adicional

Nipplette no funcionará si el flujo de leche ingresa completamente. Sin embargo, para entonces, el bebé ya estará acostumbrado a agarrar correctamente la tetina.

## Especificaciones

### Contenido

Nipplette, corrector de pezones: 2 piezas  
Protectores mamarios descartables: 2 piezas

### Diseño

Diseño discreto

### Etapas de desarrollo

Etapas: Antes del embarazo, 0 a 6 meses,  
Fase de iniciación de la lactancia

### Fácil de usar

Fáciles de ocultar bajo la ropa: Presione la jeringa para liberar el vacío

### Fácil de limpiar

Limpie con agua caliente con jabón

### Funciones

Solución para pezones planos: Utiliza succión delicada

### Material

Nipplette, corrector de pezones: Polipropileno  
Protectores mamarios: Probado dermatológicamente



\* Sr. D. McGeorge, FRCS (cirujano plástico), el Nipplette: un instrumento para la corrección de pezones invertidos sin cirugía, *British Journal of Plastic Surgery* (1994), volumen 47, páginas 46-49

\* En esta sección, se incluyen opiniones del consumidor acerca del producto. Philips se desvincula del contenido que ingresaron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluya en el presente documento no se considera como información oficial de Philips.