

PHILIPS**SCF153****AVENT****Nipple shield
Tepelbeschermer**

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands
www.philips.com/avent

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.038.9742.1 (5/11/2019)


FSC
**ENGLISH**

Intended use The Philips Avent Nipple Shield is intended to cover and protect the nipples of lactating women to support breastfeeding. The device is intended for a single user.

Indications for use The Philips Avent Nipple Shield is indicated for use when the mother has sore, sensitive, cracked nipples or suffers from nipple pain. It is also indicated to help the baby develop better latch-on behavior in case of oral anomalies or when the mother has flat/inverted nipples. Moreover, it can be used to alleviate milk supply difficulties when the baby is not transferring the milk well, has an uncommon sucking technique (i.e. weak sucking, small/preterm babies) or to help the baby in coping with milk flow.

Contraindications There are no contraindications.

Side effects When using the device, undesirable side effects that may occur are mastitis, cessation of breastfeeding, infant thrush and poor infant weight gain. If you or your baby experience any of these symptoms, contact a healthcare professional or breastfeeding specialist.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the product and save it for future reference.

Warning to avoid choking and swallowing

- Never leave the nipple shield and the hygiene case unattended and keep out of reach of children.
- Inspect before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness or after 2 months of usage.

Warning to avoid contamination and to ensure hygiene

- Follow the instructions described in the Cleaning and Disinfection sections.

Recommendations

- Use the product only in case of breastfeeding problems as described in the Indications For Use.
- Recommended to be used with advice from health care professional. If problems or pain occur, consult your lactation consultant or physician.
- An electronic copy of these instructions can be found at www.philips.com/support
- Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to Philips via www.philips.com/support and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Before usage**Step 1 - Cleaning****Warning**

Do not use abrasive cleaning agents or aggressive chemicals or substances when you clean the nipple shield. Clean the nipple shield and hygiene case before first use and immediately after each use.

Manual cleaning

- 1 Rinse with drinking-quality water for 10-15 seconds.
- 2 Wash in warm, drinking-quality water (approx. 35 °C) with washing-up liquid, preferably without artificial fragrances or coloring.
- 3 Rinse with drinking-quality water for 10-15 seconds.
- 4 Dry with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

Dishwasher cleaning

- 1 Place on top rack of the dishwasher.
- 2 Run standard program with common household dishwasher detergent.
- 3 If not fully dry after dishwasher program, dry with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

Step 2 - Disinfection**Warning**

Disinfect before first use and at least once a day. Clean before disinfection. Be careful: After disinfection, the nipple shields may be very hot. The hygiene case and the water remaining in the case may still be hot. To prevent burns, only use after cooling down for 5 minutes.

Warnings to avoid contamination and to ensure hygiene

If you use the hygiene case for disinfection:

- Clean the case before first use.
- Use the correct water level, microwave power and time. Not doing so can lead to reduced disinfection and can damage the case or nipple shields.
- Only use the case provided.

Boiling

- 1 Clean as described under 'Cleaning'.
- 2 Boil the nipple shields in drinking-quality water for 5 minutes.
- 3 Leave to dry on a clean surface.

Microwave Alternatively, use only the hygiene case provided according to the instructions below.

- 1 Clean the hygiene case (as described under 'Cleaning').
- 2 Add 25 ml of drinking-quality water to the case, up to the indicated line (Fig. 1).
- 3 Place the nipple shield(s) in the hygiene case and securely close the lid (Fig. 2).
- 4 Place the filled hygiene case in the microwave for 3 minutes at 750-1000 W (Fig. 3).
- 5 Let the hygiene case cool down for 5 minutes (Fig. 4).
- 6 Drain water from the hygiene case (Fig. 5).
- 7 Dry the nipple shield(s) with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

Usage**Warning**

Wash your hands and breasts thoroughly with soap and water before you touch the nipple shields to prevent contamination.

Applying the product Follow the instructions below when placing the device on your breast:

- 1 Remove the cleaned and disinfected nipple shield from the hygiene case.
- 2 Place drinking-quality water or breast milk on the skin-facing side of the brim to help the shield stick to your skin (Fig. 6).
- 3 Hold the shield at the base of the nipple area and press the nipple cavity partially inside out, so that it becomes half way inverted (Fig. 7).
- 4 Rotate the shield so that the baby can have nose and chin contact with your breast (Fig. 8).
- 5 Center the shield over your nipple and slightly stretch the wings of the shield as you stick the product onto your breast (Fig. 9).
- 6 With the shield applied, you can now breastfeed as normal.

Storing Store the clean nipple shield(s) in the hygiene case or in a dry, clean container. Storing the nipple shield(s) in an unclean or wet container could cause contamination.

Disposal According to local regulations.

Explanation of symbols

The warning signs and symbols are essential to ensure that you use this product safely and correctly and to protect you and others from injury. Below you find the meaning of the warning signs and symbols on the label and in the user manual.



This symbol indicates that the device complies with European Medical Device Directive 93/42/EEC requirements.



This symbol indicates the hygiene case is microwave compatible.



This symbol indicates to fill the hygiene case with water.



This symbol indicates to wait 5 minutes before taking the hygiene case out of the microwave.



The 5 inside this symbol is the recycling code used to identify the material from which the hygiene case is made, which is polypropylene (PP), to facilitate recycling or other reprocessing.



The Green Dot ('Der Grüne Punkt' in German) is the license symbol of a European network of industry-funded systems for recycling the packaging materials of consumer goods.

Technical specifications

- Product type: Two type nipple shield size: Small 15 mm; Medium: 21 mm.
- Materials: Silicone (nipple shield); Polypropylene (hygiene case)
- Service life: 2 months

NEDERLANDS

Beoogd gebruik De Philips Avent-tepelbeschermer bedekt en beschermt de tepels van vrouwen bij het geven van borstvoeding. Het apparaat is bedoeld voor een enkele gebruiker.

Indicaties voor gebruik De Philips Avent-tepelbeschermer is geïndiceerd voor gebruik als de moeder pijnlijke of gevoelige tepels heeft of last heeft van tepelkloven. De tepelbeschermer is ook bedoeld om borstvoeding gemakkelijker te maken bij mondelinge afwijkingen van de baby of als de moeder platte/ omgekeerde tepels heeft. Het kan ook helpen problemen met de melktoevoer te verhelpen wanneer de baby niet goed drinkt of een ongebruikelijke drinktechniek heeft (bijv. als de baby weinig zuigkracht heeft of voor kleine/ te vroeg geboren baby's), of om de baby te helpen omgaan met de melkstroom.

Contra-indicaties Er zijn geen contra-indicaties.

Bijwerkingen Bij het gebruik van het apparaat kunnen zich ongewenste bijwerkingen voordoen, zoals mastitis (borstontsteking), beëindiging van de lactatie, spruw en een slechte gewichtstoename van het kind. Neem contact op met een gezondheidszorgprofessional of lactatiedeskundige als u of uw baby een van deze symptomen ervaart.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen

Waarschuwing om verstikking en inslikken te voorkomen

- Laat de tepelbeschermer en het hygiënische bewaardoosje niet onbeheerd achter en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Inspecteer vóór elk gebruik. Gooi het product weg bij de eerste tekenen van slijtage of beschadiging, of na twee maanden gebruik.

Waarschuwing om besmetting te voorkomen en hygiëne te waarborgen

- Volg de instructies die worden genoemd in de hoofdstukken Reinigen en Desinfecteren.

Aanbevelingen

- Gebruik het product alleen bij problemen met de borstvoeding die in het gedeelte Indicaties voor gebruik worden vermeld.
- Het wordt aangeraden dit product in overleg met een professionele zorgverlener te gebruiken. Neem contact op met uw lactatiekundige of huisarts bij problemen of pijn.
- Een elektronische versie van deze instructies is te vinden op www.philips.com/support
- Elk ernstig incident dat zich in verband met dit apparaat heeft voorgedaan, moet via www.philips.com/support aan Philips en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd, worden gemeld.

Voordat u het apparaat gebruikt

Stap 1 - Reinigen

⚠ Waarschuwing

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of agressieve chemicaliën om de tepelbeschermer schoon te maken. Reinig de tepelbeschermer en het hygiënische bewaardoosje vóór het eerste gebruik en onmiddellijk na elk gebruik.

Handmatige reiniging

- 1 10-15 seconden lang afspoelen met water van drinkwaterkwaliteit.
- 2 Schoonmaken in warm water van drinkwaterkwaliteit (ong. 35 °C) met afwasmiddel zonder kunstmatig geur- of kleurstoffen.
- 3 10-15 seconden lang afspoelen met water van drinkwaterkwaliteit.
- 4 Afdrogen met een schone doek of laat drogen op een schoon oppervlak.

Schoonmaken in de vaatwasmachine

- 1 Plaats op het bovenste rek van de vaatwasmachine
- 2 Gebruik het standaardprogramma en gewoon afwasmiddel voor vaatwasmachines.
- 3 Als het product niet droog is, droog het dan af met een schone doek of laat drogen op een schoon oppervlak.

Stap 2 - Desinfecteren

⚠ Waarschuwing

Desinfecteer het product vóór het eerste gebruik en ten minste één keer per dag. Maak het product schoon vóór u het desinfecteert. Voorzichtig: De tepelbeschermers kunnen na het desinfecteren erg heet zijn. Het hygiënische bewaardoosje en het water in het doosje kunnen erg heet zijn. Laat het vóór gebruik vijf minuten afkoelen om brandwonden te voorkomen.

⚠ Waarschuwingen om besmetting te voorkomen en hygiëne te waarborgen

Als u het hygiënische bewaardoosje gebruikt om te desinfecteren:

- Reinig het bewaardoosje voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
- Gebruik het juiste waterniveau, en stel de magnetron in op de juiste tijd en het juiste vermogen. Als u dit niet doet, worden het bewaardoosje of de tepelbeschermers mogelijk niet goed gedesinfecteerd of kunnen ze beschadigd raken.
- Gebruik uitsluitend het meegeleverde bewaardoosje.

Koken

- 1 Maak het product schoon zoals wordt beschreven in 'Schoonmaken'.
- 2 Laat de tepelbeschermers 5 minuten in water van drinkwaterkwaliteit koken.
- 3 Laat drogen op een schoon oppervlak.

Magnetron U kunt ook alleen het meegeleverde hygiënische bewaardoosje gebruiken. Volg in dat geval de onderstaande instructies.

- 1 Maak het hygiënische bewaardoosje schoon (zoals wordt beschreven in 'Reinigen').
- 2 Voeg 25 ml water van drinkwaterkwaliteit toe aan het doosje, tot de aangegeven streep (afbeelding 1).
- 3 Plaats de tepelbeschermers in het hygiënische bewaardoosje en sluit het deksel (afbeelding 2).
- 4 Plaats het hygiënische bewaardoosje 3 minuten in de magnetron op een vermogen van 750-1000 W (afbeelding 3).
- 5 Laat het hygiënische bewaardoosje 5 minuten afkoelen (afbeelding 4).
- 6 Laat het water in het hygiënische bewaardoosje wegstromen (afbeelding 5).
- 7 Droog de tepelbeschermers af met een schone doek of laat drogen op een schoon oppervlak.

Gebruik

⚠ Waarschuwing

Om besmetting te voorkomen, moet u uw handen en borsten goed wassen met zeepsop voordat u de tepelbeschermers aanraakt.

Het product aanbrengen Volg de onderstaande instructies om het product op uw borst te plaatsen:


- 1 Haal de gereinigde en gedesinfecteerde tepelbeschermer uit het hygiënische bewaardoosje.
- 2 Breng wat water van drinkwaterkwaliteit of moedermelk aan op het oppervlak dat op de huid wordt geplaatst, zodat de beschermer beter op uw huid blijft plakken (afb. 6).
- 3 Houd de beschermer onderaan bij de tepel en keer de tepelopening gedeeltelijk binnenstebuiten, totdat deze halverwege omgekeerd is (afbeelding 7).
- 4 Draai de beschermer zodanig dat de neus en kin van de baby contact kunnen maken met de huid van uw borst (afbeelding 8).
- 5 Houd de beschermer recht voor uw tepel, strek de vleugels van de beschermer een beetje en plak het product op uw borst (afbeelding 9).
- 6 Wanneer de beschermer is geplaatst, kunt u zoals normaal borstvoeding geven.


Opslaan Bewaar de schone tepelbeschermers in het hygiënische bewaardoosje of in een droge, schone houder. Als u de tepelbeschermers in een vieze of natte houder bewaart, kunnen er verontreinigingen ontstaan.


Afvoeren Voer het product conform.

Uitleg van symbolen

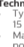
De waarschuwingstekens en symbolen moeten ervoor zorgen dat u dit product veilig en op de juiste manier gebruikt, om u en anderen voor letsel te behoeden. Hieronder vindt u een overzicht van de waarschuwingstekens en symbolen die op het etiket en in de gebruiksaanwijzing voorkomen en de betekenis ervan.

 Dit symbool geeft aan dat dit apparaat voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

 Dit symbool betekent dat het hygiënische bewaardoosje geschikt is voor de magnetron.

 Dit symbool betekent dat het hygiënische bewaardoosje met water gevuld moet worden.

 Dit symbool betekent dat u 5 minuten moet wachten voordat u het hygiënische bewaardoosje uit de magnetron haalt.

 De 5 in dit symbool geeft de recyclecode aan die gebruikt wordt om aan te geven uit welk materiaal het hygiënische bewaardoosje is gemaakt (polypropyleen), om recycling of andere verwerking gemakkelijker te maken.

 De Groene Punt ('Der Grüne Punkt' in het Duits) is het logo voor de licentie van een Europees netwerk van door de branche gefinancierde systemen voor het recyclen van verpakkingsmaterialen van consumptiegoederen.

Technische gegevens

- Type product: tepelbeschermer, twee maten: klein: 15 mm; medium: 21 mm.
- Materialen: siliconen (tepelbeschermer); polypropyleen (hygiënisch bewaardoosje)
- Levensduur: 2 maanden